




**TST-RPSP9104-EPTB COMPRESA DE PERLAS
PARA TERAPIA FRIO/CALIENTE BENESTA
REXICARE PARA RODILLA Y CODO**

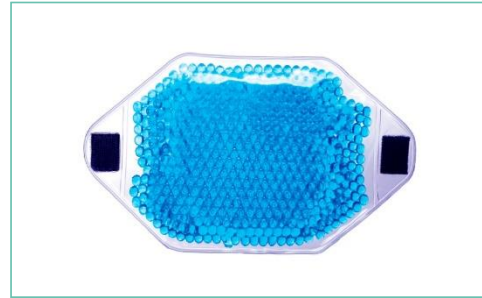

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Compresa de perlas.
Suave y confortable.
Para terapia fría o caliente.
Reusable.
Se puede utilizar en horno de micro ondas.
Con velcro elástico.
Para uso en rodilla y codo.




ESPECIFICACIONES

Dimensiones: 18 x 12 cm
Material: Perlas de gel
Color: azul
30 a 45 minutos se conserva caliente la compresa
Terapia fría: de 10 a 15 minutos en congelador
Terapia en agua caliente: meter la compresa en agua caliente de 10 a 15 minutos máximo a 80°C
Terapia caliente en microondas: colocar la compresa por 25 segundos a una potencia máxima de 800W



USOS

Se usa la compresa para desinflamación muscular, tratamientos posts quirúrgicos y como herramienta complementaria de rehabilitación para rodilla y codo principalmente.

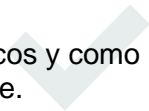

PUNTOS DE VENTA

Vida útil de 3 años
Hecho en Taiwan por una de las empresas mas grandes dedicadas a la fabricación de este tipo de productos.
Garantía: 1 año por defecto de fabricación.

